

水分天平(水分分析儀)

Moisture Analyzer

特價供應!



德國 **KERN** 型號：DBS 60-3

◆ 簡介：

DBS 60-3 經由乾燥減量法(加熱乾燥、質量測定方式)，快速可靠地測定液體、多孔性和固體材料中所含水分。

測定對象：

茶葉、穀類、澱粉、小麥粉、餅乾、食品、調味料、海鮮、魚貝肉類、藥品、飼料、釀造品、油類、乳製品、合成樹脂原料、土壤、砂、水泥、石炭、骨材、化學肥料...等。



◆ 特點/規格：


1. 樣品重量：0.02 ~ 60 g
2. 最小重量/水分顯示：0.001 g (1 mg) / 0.01%
3. 測定範圍：水分，固形分 0 ~ 100%
4. 再現性：0.15% (樣品重 2 g) / 0.02% (樣品重 10 g)
5. 秤重感測元件：電磁力補償感測器 **DBS 60-3**



(線圈在永久磁鐵中，以達最準確的秤重)



6. 測定模式：自動停止測定、時間停止測定、急速乾燥測定、緩速乾燥測定、可程式乾燥測定
7. 溫度設定：50 ~ 200°C，最小刻度 1°C
8. 熱源：400 W 鹵素石英管
9. LCD 顯示：測定模式、加熱時間、溫度及測定值 (亦可切換顯示重量差)
10. 內部記憶體可儲存 10 筆加熱模式及 100 筆測定值
11. 輸出：具 RS232 輸出埠
12. 尺寸/重量：約 202×336×157(W×D×H) mm / 約 4.3 kg
13. 標準配件：樣品皿 50 個、樣品皿支撐架 1 個、防風盤 1 個、隔熱板 1 個、保險絲 2 個、夾子 1 支、電源線 1 條、使用說明書 1 本

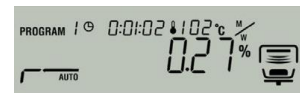

YENSTRON 研士強
Instruments, Metrology & Testing Equipment
儀器、度量衡計器 & 試驗設備

臺灣總代理&售後服務 **YENSTRON CORP.**
益瀚國際科技股份有限公司
407227台中市西屯區工業區一路2巷7號1F
台中總公司/TEL: (04) 2359-3199 FAX: (04) 2359-8507
台南營業處/TEL: (06) 358-3169 FAX: (06) 358-3167

<http://www.yenstron.com.tw>

[e-mail:yenstron@yenstron.com.tw](mailto:yenstron@yenstron.com.tw)